

COMPOSITO SUB-MICROIBRIDO UNIVERSALE

BRILLIANT EverGlow[®]

Lucidatura a Specchio di Lunga Durata –
un risultato brillante



NUOVI COLORI



RISULTATI BRILLANTI

Con il composito universale BRILLIANT EverGlow è possibile ottenere senza sforzo restauri di alto valore estetico e che durano nel tempo.

È stato sviluppato puntando in modo particolare all'estetica e alla facilità d'impiego. Questo prodotto si distingue infatti per la praticità d'utilizzo, l'eccezionale integrazione cromatica e le elevate caratteristiche di lucentezza.

BRILLIANT EverGlow non è soltanto semplice da lucidare: grazie alla maggiore resistenza all'abrasione e all'eccellente mantenimento della lucentezza, consente anche di ottenere risultati brillanti che durano nel tempo.

- Lucidabilità eccezionale e brillantezza che dura nel tempo
- Restauri estetici con un'unica tinta (single-shade)
- Sistema colori versatile con tre livelli di traslucenza
- Eccellente modellabilità e consistenza vellutata
- Buona bagnabilità con minima adesione allo strumento




LUCIDABILITÀ ECCEZIONALE E BRILLANTEZZA CHE DURA NEL TEMPO

LA COMPOSIZIONE DEI RIEMPITIVI MIRA ALLA LUCENTEZZA

Subito dopo l'applicazione, BRILLIANT EverGlow si presenta con una superficie eccezionalmente liscia e satinata grazie alla composizione submicronica del riempitivo. La fase di lucidatura si riduce ed in brevissimo tempo è possibile eseguire restauri altamente estetici. BRILLIANT EverGlow convince per il suo mantenimento della lucentezza anche a lungo termine.


VALUTAZIONE DELLA LUCIDABILITÀ ¹

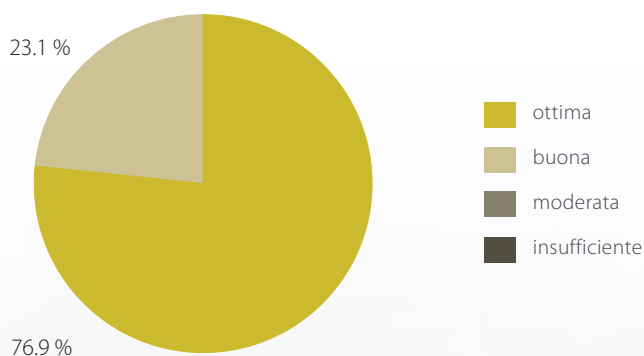

La buona lucidabilità è stata confermata dai dentisti. In un sondaggio tra 39 dentisti in Europa e negli USA, il **100%** di essi ha dato un punteggio positivo. Il 76,9% ha addirittura assegnato il massimo punteggio possibile.

MANTENIMENTO DELLA LUCENTEZZA ¹

Dopo trattamento con simulatore (spazzolino da denti) espressa in unità di lucentezza (GU)

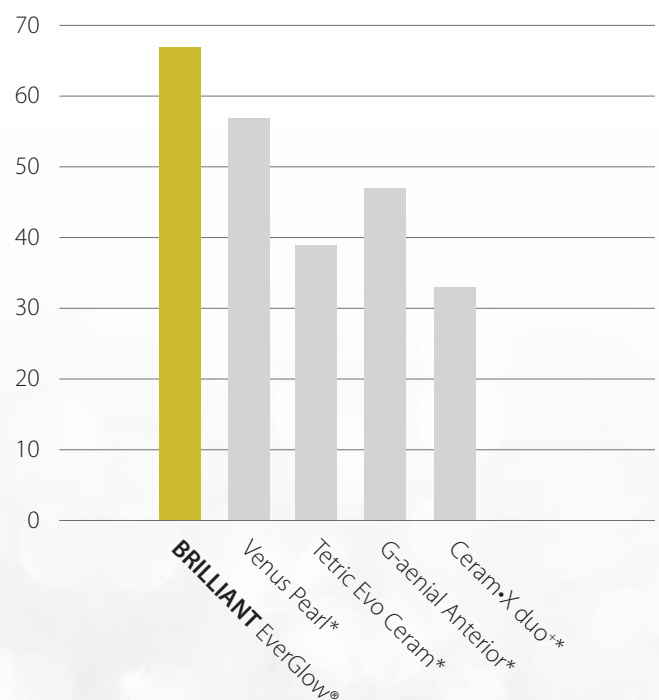

Anche dopo l'esposizione a oltre 20.000 movimenti di spazzolamento con simulatore, BRILLIANT EverGlow mantiene ottimamente la lucentezza iniziale.


¹ Fonte: dati interni | * non è un marchio commerciale di COLTENE

RESTAURI ESTETICI SINGLE-SHADE CON COLORI UNIVERSALI

COLTENE È UN INNOVATORE NELL'ESTETICA DEI COLORI

BRILLIANT EverGlow offre colori universali nel collaudato sistema Duo Shade inventato da COLTENE. Duo Shade semplifica la gestione dei colori combinando due colori VITA* in un'unica tinta (ad es. A1/B1 o A2/B2). Questo è reso possibile dalle caratteristiche ottiche di Duo Shade, che consentono una fusione armoniosa con i denti adiacenti.

*VITA non è un marchio commerciale di COLTENE

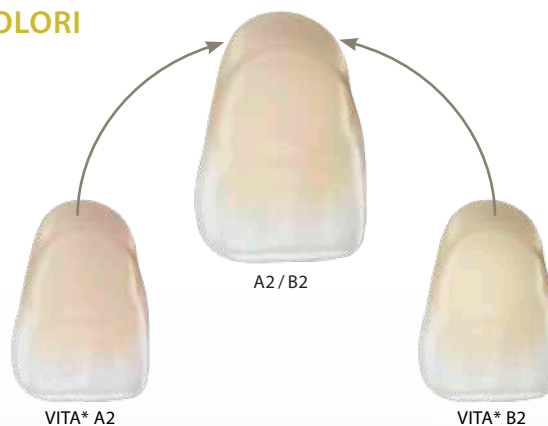

Caso clinico con il solo impiego di A3/D3

Situazione iniziale



Trattamento



Trattamento



Risultato finale



LEGGETE QUESTA RELAZIONE
D'IMPIEGO DEL DENTISTA
DR. MED.DENT. MARKUS LENHARD
E MOLTE ALTRE RELAZIONI

everglow.coltene.com/lit/it


Per BRILLIANT EverGlow il concetto Duo Shade è stato portato al livello successivo: i colori universali. Grazie all'impiego di un unico colore universale è possibile realizzare restauri single-shade senza soluzione di continuità, eliminando la necessità di aggiungere uno smalto traslucido. La realizzazione di alti livelli estetici non è mai stata più semplice.



RACCOMANDAZIONI SULLE
COMBINAZIONI CROMATICHE



everglow.coltene.com/tips/it

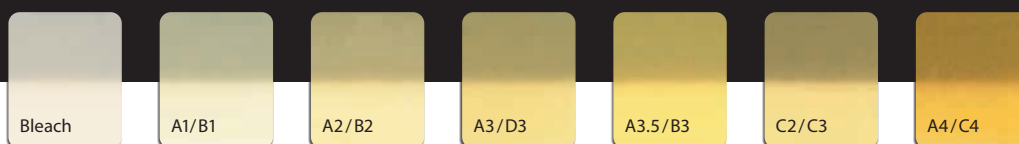

7 COLORI UNIVERSALI

- "Duo Shade" su base VITA*
- Per otturazioni anteriori e posteriori
- Per restauri estetici single-shade
- Per sostituzione dentina in restauri multi-shade

IL SISTEMA COLORI FLESSIBILE ANCHE PER I CASI PIÙ COMPLESSI

In aggiunta ai colori universali, sono disponibili otto colori supplementari per la personalizzazione con la tecnica di stratificazione dei colori. Questo permette di ottenere un risultato armonioso anche nei casi più complessi.

I colori traslucidi imitano le aree di smalto particolarmente pronunciate, mentre i cinque colori opachi pongono la base per denti dal colore alterato o tatuaggi da amalgama.

SEMPLICE PER LA PRATICA QUOTIDIANA



Restauri single-shade anteriori



Restauri single-shade posteriori



Colore opaco + Universale

PROFESSIONALE PER I CASI PIÙ IMPEGNATIVI




Colore universale + Strato di copertura traslucido




Colore opaco + Colore universale




Colore opaco + Universale + Strato coprente traslucido

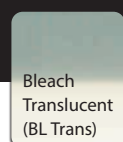


Bleach Translucent (BL Trans)

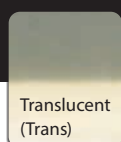


Translucent (Trans)

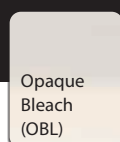


Opaque Bleach (OBL)

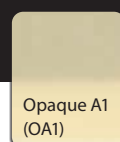


Opaque A1 (OA1)

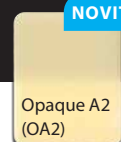

Opaque A2 (OA2)

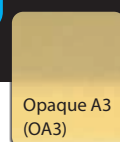

Opaque A3 (OA3)

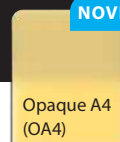

Opaque A4 (OA4)

2 COLORI TRASLUCIDI

- Per la caratterizzazione individuale di uno smalto particolarmente traslucido

5 COLORI OPACHI

- Per mascherare le alterazioni cromatiche e i tatuaggi da amalgama

ECCELLENTE MODELLABILITÀ E CONSISTENZA VELLUTATA

"BRILLIANT EverGlow è un composito di cui non potrei proprio fare a meno: è semplice da usare, pratico da applicare e garantisce sempre una lucidatura eccellente."


Dr Monik Vasant
BChD MFGDP MSc



La consistenza vellutata e la stabilità dimensionale rendono BRILLIANT EverGlow un materiale d'otturazione allo stato dell'arte, agevole e pratico da applicare nelle cavità. Cuspidi modellate in modo elaborato, prominenze e punti di contatto rimangono intatti e non iniziano a deformarsi. L'elevata resistenza alla lampada operatoria e la bassa adesione, abbinate alla buona bagnabilità, completano la praticità d'impiego di questo prodotto.

ADESIONE ALLO STRUMENTO ¹

Misurata in Newton

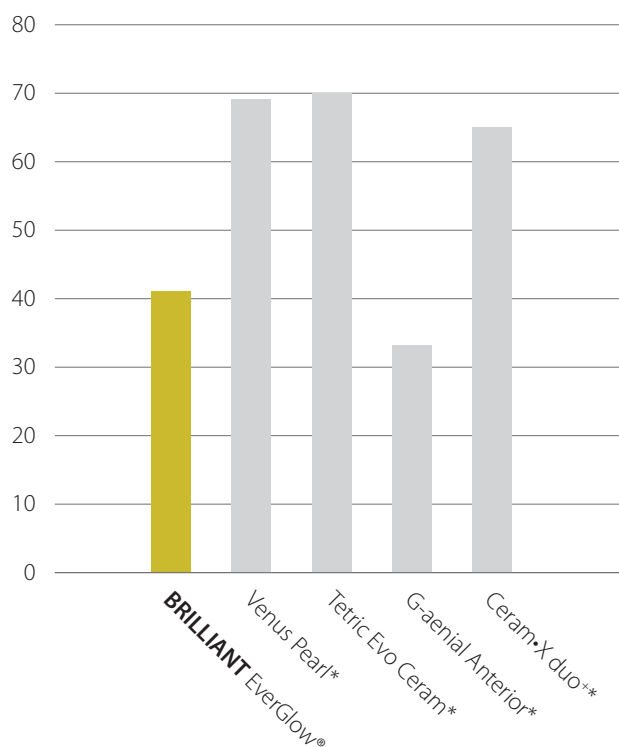


La consistenza vellutata e l'eccellente bagnabilità di BRILLIANT EverGlow lo rendono ideale per la cementazione di restauri indiretti quali BRILLIANT COMPONEER, il sistema COLTENE di gusci diretti in composito.



Sistema BRILLIANT COMPONEER di gusci diretti in composito

Grazie alla buona bagnabilità, BRILLIANT EverGlow offre un'adesione eccellente alle superfici dentarie trattate con adesivo senza attaccarsi agli strumenti. Questa proprietà è stata anche confermata in un sondaggio internazionale tra utilizzatori: oltre il 90% dei partecipanti ha giudicato la bagnabilità «ottima» o «buona».

BAGNABILITÀ SU ADESIVO ¹

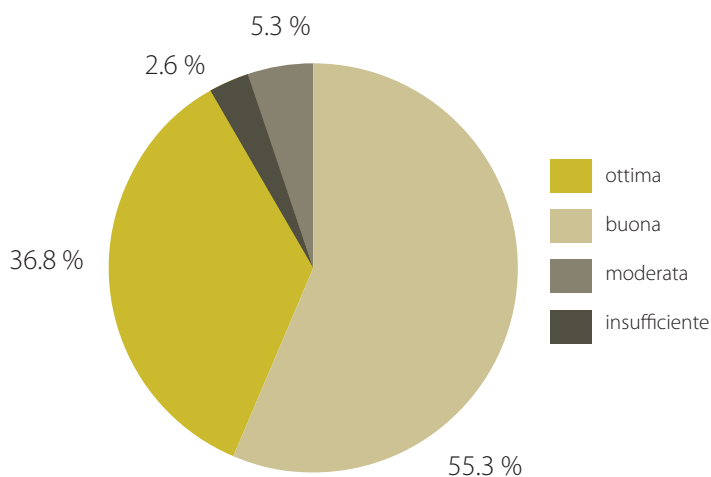

LA CHIAVE PER RESTAURI BRILLANTI



SCARICA GUIDA AL
PRODOTTO




[everglow.coltene.com/
guide/it](http://everglow.coltene.com/guide/it)

LA TECNOLOGIA DEI RIEMPITIVI DI BRILLIANT EVERGLOW

La tecnologia dei riempitivi di BRILLIANT EverGlow è concepita per offrire un insieme ideale di estetica di lunga durata, praticità d'uso e resistenza meccanica. I riempitivi vetrosi submicronici favoriscono livelli eccellenti di lucidabilità e di mantenimento della lucentezza. I riempitivi supplementari pre-polimerizzati, che hanno la stessa composizione del composito non polimerizzato, riducono la contrazione volumetrica e migliorano le caratteristiche di plasmabilità della pasta. Le superfici dei riempitivi sono trattate appositamente per garantire una resistenza ottimale del composto all'interno della matrice resinosa. Queste caratteristiche forniscono le pre-condizioni ideali per l'eccellente lucidabilità e mantenimento della lucentezza di BRILLIANT EverGlow. Il risultato è un composito allo stato dell'arte che permette restauri davvero "brillanti".

SEMPLICEMENTE SORPRENDENTE

Immagine al SEM di BRILLIANT EverGlow

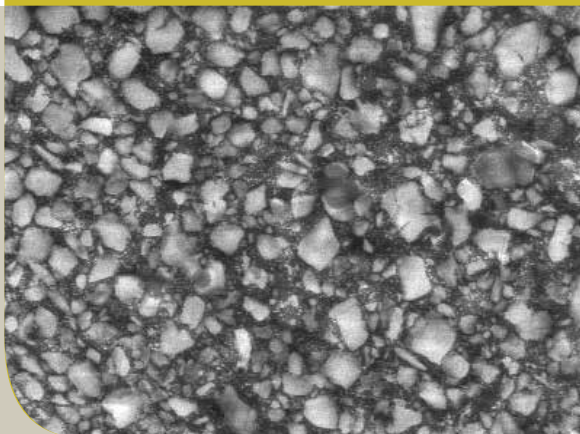


RACCOLTA DI STUDI E ALTRO ANCORA

Nelle Linee Guida di prodotto troverete altre informazioni su dati tecnici e risultati di misurazioni confrontati con prodotti concorrenti.


ABRASIONE MINIMA ¹

Rispetto ad altri compositi convenzionali, BRILLIANT EverGlow mostra valori di abrasione significativamente inferiori.

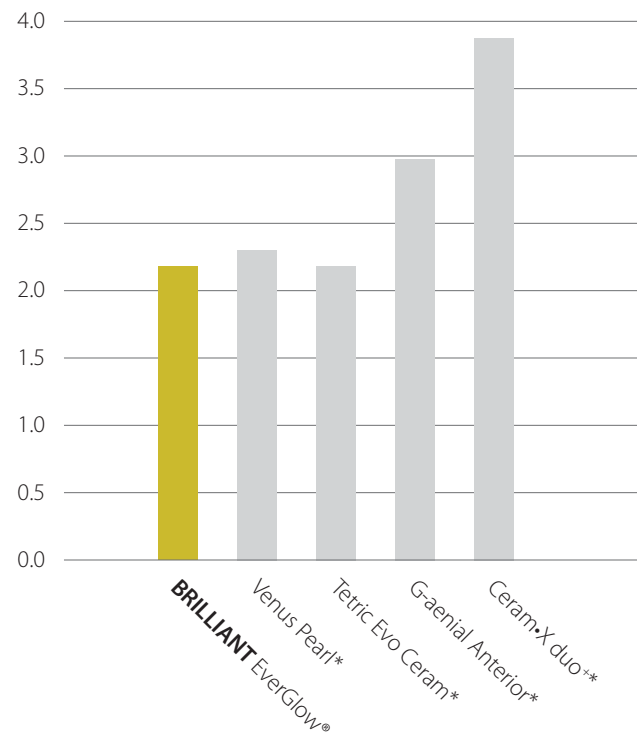

ELEVATA RESISTENZA A COMPRESIONE

Ideale per i restauri dei posteriori grazie all'elevata resistenza alle forze masticatorie.

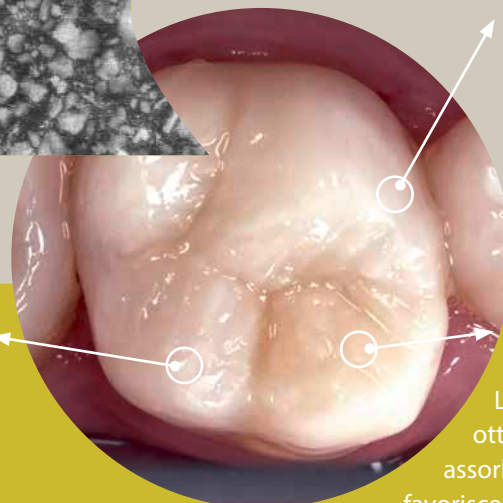

BASSO ASSORBIMENTO D'ACQUA

La composizione monomerica ottimizzata è alla base del basso assorbimento d'acqua, che a sua volta favorisce l'eccellente stabilità cromatica a lungo termine.

¹ Fonte: dati interni | * non è un marchio commerciale di COLTENE

BRILLIANT EVERGLOW FLOW

IL COMPLEMENTO IDEALE

Il composito sub-microibrido BRILLIANT EverGlow è disponibile anche in consistenza scorrevole. Oltre alle caratteristiche estetiche del materiale, è stata rivolta particolare attenzione anche alla praticità d'uso ottimale.



"Scorre senza scorrere via!"

Dr. med. dent. Christoph G. Hüskens, Svizzera

ALTA STABILITÀ ABBINATA A BUONA SCORREVOLEZZA



Con BRILLIANT EverGlow Flow l'eccellente stabilità e la buona scorrevolezza non sono più in contraddizione. BRILLIANT EverGlow Flow riesce a combinare queste caratteristiche in un unico materiale che lo rendono di

impiego estremamente versatile.

Con la sua elevata stabilità e la perfetta tissotropia, BRILLIANT EverGlow Flow può essere applicato con precisione assoluta in modo facile e controllato.

"La tissotropia, caratteristica estremamente importante, è perfetta! Applicazione eccellente senza sbaffi e colature. Il materiale può essere spostato esattamente dove serve e vi rimane per il tempo necessario alla polimerizzazione."

Dr. med. dent. Ralph Schönemann, Germania

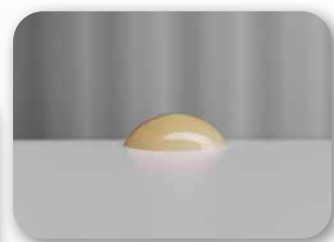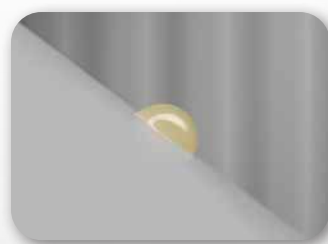

Stabilità iniziale




Mentre il comportamento a flusso controllato facilita la concentrazione sul lavoro, la bassa viscosità del materiale

garantisce una buona bagnabilità, importante ad es. in caso di rivestimento di cavità e piccole otturazioni.



AGHI PER APPLICAZIONE IN DUE MISURE PER INDICAZIONI MULTIPLE:

Ogni siringa di BRILLIANT EverGlow è disponibile con aghi applicatori in due misure. Oltre alla misura standard con diametro interno di 0,8 mm, gli accessori vengono forniti anche in una misura per applicazione fine. Con soli 0,4 mm di diametro interno, questi aghi consentono la massima precisione di applicazione.

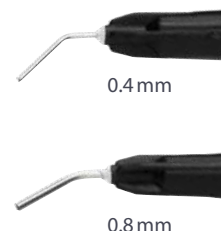

ASSORTIMENTO TINTE CORRISPONDENTE - INCLUSO IL COLORE OPACO



BRILLIANT EverGlow Flow è disponibile con tutte le caratteristiche qualitative della tecnologia dei riempitivi BRILLIANT EverGlow, quali lucidabilità e mantenimento della lucentezza. Anche l'assortimento dei colori è stato adattato e offre ora i pratici Duo Shade e tre livelli di traslucenza.

Sebbene i colori universali e traslucidi risolvano la maggior parte dei casi, le zone scure e le deviazioni del croma possono influire negativamente sull'esito estetico finale di un restauro ed esigono un rivestimento opaco delle cavità. I colori opachi OA2 e OA3 sono stati sviluppati per fare fronte a questa esigenza, creando la base per un restauro estetico dal colore armonioso.

Di conseguenza, BRILLIANT EverGlow Flow permette di ottenere risultati estetici convincenti ed è il partner perfetto per il composito universale BRILLIANT EverGlow.



INFORMAZIONI PER ORDINARE

KIT

	Colori Universali**							Colori traslucidi***	
	Bleach (BL)	A1 / B1	A2 / B2	A3 / D3	A3.5 / B3	C2 / C3	A4 / C4	Bleach Translucent (BL Trans)	Translucent (Trans)
Kit single-shade*									
60024151 7 siringhe × 3 g	1	1	1	1	1	1	1		
60024152 70 × 0,2 g tip	10	10	10	10	10	10	10		
Per ogni kit d'estensione*									
60024156 7 siringhe × 3 g								1	1
60024157 70 × 0,2 g tip								10	10
Flow Kit									
60019760 4 siringhe × 2 g		1	1	1	1				

** Per restauri single-shade o per stratificazione dei colori. Per maggiori informazioni, vedere pagina 4.

*** Altri colori da abbinare ai colori universali nella stratificazione. Per maggiori informazioni, vedere pagina 5.

REFILL

Siringhe Tip

1 × 3 g 20 × 0,2 g

60019697	60019706	● Bleach (BL)
60019698	60019707	● A1 / B1
60019699	60019708	● A2 / B2
60019700	60019709	● A3 / D3
60019701	60019710	● A3.5 / B3
60019702	60019716	● C2 / C3
60019703	60019717	● A4 / C4
60019705	60019719	● Bleach Translucent (BL Trans)
60019704	60019718	● Translucent (Trans)
60019743	60019746	● Opaque Bleach (OBL)
60019744	60019747	● Opaque A1 (OA1)
60023819	60023823	● Opaque A2 (OA2)*
60019745	60019748	● Opaque A3 (OA3)
60023820	60023824	● Opaque A4 (OA4)*

ECO PACKS

Siringhe Tip

5 × 3 g 60 × 0,2 g

60024166	60024160	● A1 / B1
60024167	60024161	● A2 / B2
60024168	60024162	● A3 / D3
60024169	60024163	● A3.5 / B3



60019709 60019748



60019700

60023819

FLOW Siringhe

1 × 2 g + 10 aghi per applicazione

60019752	● Bleach (BL)
60019753	● A1 / B1
60019754	● A2 / B2
60019755	● A3 / D3
60019756	● A3.5 / B3
60019757	● A4 / C4
60019758	● Translucent (Trans)
60019751	● Opaque A2 (OA2)
60023825	● Opaque A3 (OA3)*



60019753

Flow

Colori opachi***					Accessori					
					Guida colore		Dispenser con tip	Blocco carta mini	Aghi per applicazione	
Opaque Bleach (OBL)	Opachi A1 (OA1)	Opachi A2 (OA2)	Opachi A3 (OA3)	Opachi A4 (OA4)	Universale	Estensione			Standard Ø 0,8 mm	Sottile Ø 0,4 mm
					1				2	
					1		1		2	
1	1	1	1	1		1			2	
10	10	10	10	10		1	1		2	
								1	20	20

ACCESSORI

- 60024158** Guida colori Colori universali
- 60024159** Estensione guida colori con Colori traslucidi + Colori opachi
- 60022485** Composite Tip Dispenser
- 8469** Aghi per applicazione standard 20 x Ø 0,8 mm
- 60022137** Aghi per applicazione Flow sottili, 20 x Ø 0,4 mm



0.8 mm
8469

0.4 mm
60022137



60024158

60022485



60024159

PRODOTTI COMPLEMENTARI

ONE COAT 7 UNIVERSAL

Adesivo monocomponente fotopolimerizzante per cementazione adesiva con tecnica di auto-mordenzatura, mordenzatura totale o mordenzatura selettiva.

60019538 Intro kit

BRILLIANT COMPONEER

Gusci in composito prefabbricati per il restauro dei denti anteriori. Le faccette basate sulla tecnologia dei riempitivi di BRILLIANT EverGlow sono disponibili nei colori Translucent e Bleach Translucent.

60023214 Intro kit siringhe
60023215 Intro kit tips

DIATECH ShapeGuard

Lucidante in silicone per la pre-lucidatura (viola) e la lucidatura a specchio (blu) dei restauri in composito. Grazie alle lamelle flessibili, il DIATECH ShapeGuard si adatta alla struttura della superficie.

60019916 Composite Polishing Plus Kit



60023214



"Sono rimasto enormemente colpito dalle prestazioni di COLTENE BRILLIANT EverGlow. Non si appiccica agli strumenti e questo, oltre alla sua facilità nel seguire i movimenti di compattamento dell'operatore, ne assicura un affidabile adattamento alla forma della cavità. Ciò consente di ottenere risultati estetici stupefacenti e, senza dover applicare un protocollo di finitura complesso, si avrà un risultato liscio, lucente e naturale. Ha un adattamento eccellente del colore e non potrò mai raccomandarlo abbastanza per la dotazione di ogni dentista."

Dr. Nalin Karunaratne, Regno Unito



"Come opinion leader di numerose aziende del settore dentale, ho avuto l'opportunità di lavorare e testare svariati compositi. Con BRILLIANT EverGlow è stato «amore a prima vista». È estremamente semplice abbinare il colore e nascondere la preparazione dei margini, malgrado l'impiego di un numero di colori limitato, ed è altrettanto facile ottenere sempre risultati prevedibili e di alta qualità, dal punto di vista sia estetico che clinico."

Dr. Monaldo Saracinelli,
Gruppo Style Italiano, Italia



LINK AL VIDEO
THE BRILLIANT EVERGLOW

everglow.coltene.com/mov/it



LINK A RELAZIONI D'IMPIEGO

everglow.coltene.com/lit/it



LINK A ULTERIORI
INFORMAZIONI TECNICHE

everglow.coltene.com/guide/it

© COLTENE – www.coltene.com

Coltène Italia S.r.l
c/o Polo Tecnologico della
Brianza, Via Alessandro Volta,
94 - Cond. Bianchi
20832 Desio (MB) / Italy
T +39 0362 62 67 32
F +39 0362 63 25 80
info.it@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstr. 20
9450 Altstätten / Svizzera
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
T +1 330 916 8800
F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

 **COLTENE**